


転倒・転落防止対策に

ベッドから起き上がって、ベッドパッドセンサーに圧（体重）が無くなると反応します。

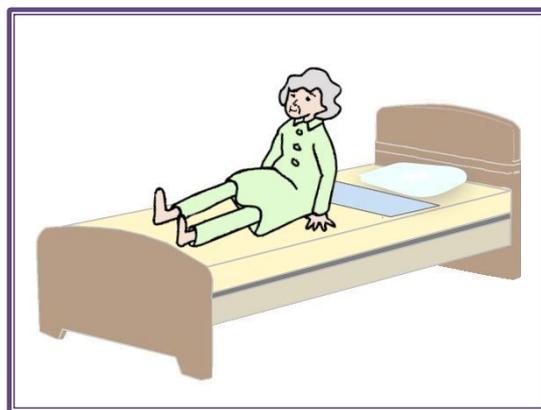

安全と安心の機能

不要コール防止機能（特許第 6190755 号）

ON/OFF スイッチの入れ忘れ事故を防ぐことができます。

ON/OFF スイッチを切らなくてもセンサーを一時停止でき、終了すれば自動復帰します。

一時停止の時間設定は、利用者がセンサーから離れてから次にセンサーの上に乗るまでの間です。

反応遅延時間

0 秒、2 秒

センサー不全の報知機能

送信機の電池が消耗するとセーフモニタに信号消失を報せてくれます。

パッドセンサーの種類と設置

CMP-01

コードレス
ベッドパッドセンサー S



送信器収納ポケット
送信器を収納



CBP-01


コードレス
ベッドパッドセンサー W




TM-11

コードレスセンサー送信器

パッドセンサーの設置例

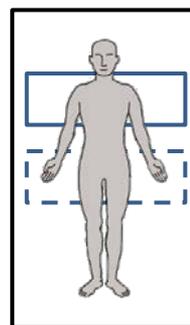

ベッドパッドセンサー S
肩やお尻で圧の掛かり易い
場所に設置

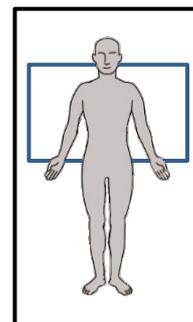

ベッドパッドセンサー W
肩とお尻の全体が掛かる場所
に設置

報知方法により機種を選べます

アラーム音で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

CBSS-A 電波到達距離 50m (見通)

コードレス
ベッドパッドセンサー S ※1

コードレス
セーフモニタ EXR

CBSW-A 電波到達距離 50m (見通)

コードレス
ベッドパッドセンサー W ※1

コードレス
セーフモニタ EXR

ナースコールで報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

CBSS-N 電波到達距離 50m (見通)

コードレス
ベッドパッドセンサー S ※1

コードレス
セーフモニタ EXR

ナースコール子機
ナースコールアダプタ ※2

CBSW-N 電波到達距離 50m (見通)

コードレス
ベッドパッドセンサー W ※1

コードレス
セーフモニタ EXR

ナースコール子機
ナースコールアダプタ ※2

無線器で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

CBSS-R 電波到達距離 50m (見通)

コードレス
ベッドパッドセンサー S ※1

コードレス
セーフモニタ EXR

送信器
電波到達距離 100m (見通)
携帯受信器

CBSW-R 電波到達距離 50m (見通)

コードレス
ベッドパッドセンサー W ※1

コードレス
セーフモニタ EXR

送信器
電波到達距離 100m (見通)
携帯受信器

コードレスベッドセンサー

報知方法	商品名	カタログ番号	価格 (税別)
アラーム	コードレスベッドセンサー STD AL	CBSS-A	¥69,000
アラーム	コードレスベッドセンサー WIDE AL	CBSW-A	¥70,000
ナースコール	コードレスベッドセンサー STD NC	CBSS-N	¥78,500
ナースコール	コードレスベッドセンサー WIDE NC	CBSW-N	¥79,500
無線器	コードレスベッドセンサー STD RF	CBSS-R	¥95,500
無線器	コードレスベッドセンサー WIDE RF	CBSW-R	¥96,500

※1 ベッドパッドセンサーは、消耗品です。

※2 ナースコールアダプタは、施設毎で異なります。ナースコールアダプタ参照表でご確認ください。

製造発売元：

Neo-firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail : info@neo-firm.co.jp

ホームページ : http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。