


徘徊防止対策に

ベッドからの離床、離室、離棟、離館をいち早く察知して徘徊の防止対策にご利用いただけます。

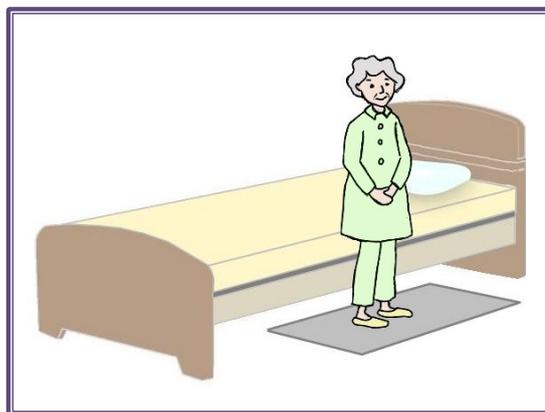

安全と安心の機能

不要コール防止機能 (特許第 6190755 号)

ON/OFF スイッチの入れ忘れ事故を防ぐことができます。

ON/OFF スイッチを切らなくてもセンサーを一時停止でき、終了すれば自動復帰します。

一時停止の時間設定は、スタッフがマットに乗ってから降りるまで間です。

抗菌性と反スリップ性の弾力のあるマット

表面は抗菌処理され、裏面は滑りにくいPVCを使用し、マット自体で軽い衝撃を吸収します。

センサー不全の報知機能

送信器の電池が消耗するとセーフモニタに信号消失を報せてくれます。

マットセンサーの種類


折り畳み式

CFMT-10 2つ折り

CFMT-20 3つ折り



CFMT-10
コードレスマットセンサー F10

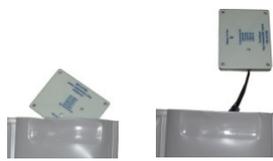

送信器収納ポケット
送信器を収納



CFMT-20
コードレスマットセンサー F20

報知方法により機種を選べます

アラーム音で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

CMAT-AL-F10 電波到達距離 50m (見通)

コードレス マットセンサー F10 ※¹ コードレス セーフモニタ EXR

CMAT-AL-F20 電波到達距離 50m (見通)

コードレス マットセンサー F20 ※¹ コードレス セーフモニタ EXR

ナースコールで報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

CMAT-APR-F10 電波到達距離 50m (見通)

コードレス マットセンサー F10 ※¹ コードレス セーフモニタ EXR

ナースコール子機
ナースコールアダプタ ※²

CMAT-APR-F20 電波到達距離 50m (見通)

コードレス マットセンサー F20 ※¹ コードレス セーフモニタ EXR

ナースコール子機
ナースコールアダプタ ※²

無線器で報知するタイプ (不要コール防止機能搭載)

CMAT-RF-F10 電波到達距離 50m (見通)

コードレス マットセンサー F10 ※¹ コードレス セーフモニタ EXR

送信器 電波到達距離 100m (見通)
携帯受信器

CMAT-RF-F20 電波到達距離 50m (見通)

コードレス マットセンサー F20 ※¹ コードレス セーフモニタ EXR

送信器 電波到達距離 100m (見通)
携帯受信器

コードレスマットセンサー

| 報知方法 | 商品名 | カタログ番号 | 価格 (税別) |
|--------|-------------------|---------------------|----------|
| アラーム | コードレスマットセンサー AL10 | CMAT-AL-F10 | ¥96,000 |
| アラーム | コードレスマットセンサー AL20 | CMAT-AL-F20 | ¥106,500 |
| ナースコール | コードレスマットセンサー AF10 | CMAT-APR-F10 | ¥106,500 |
| ナースコール | コードレスマットセンサー AF20 | CMAT-APR-F20 | ¥116,500 |
| 無線器 | コードレスマットセンサー RF10 | CMAT-RF-F10 | ¥123,500 |
| 無線器 | コードレスマットセンサー RF20 | CMAT-RF-F20 | ¥133,500 |

※¹ マットセンサーは、消耗品です。

※² ナースコールアダプタは、施設毎で異なります。ナースコールアダプタ参照表でご確認ください。

製造発売元：

Neo-firm

株式会社ネオファーム

〒651-1413

兵庫県西宮市北六甲台3丁目10番4号

TEL.078-904-2311 FAX.078-904-2312

E-Mail : info@neo-firm.co.jp

ホームページ : http://www.neo-firm.co.jp

お問い合わせ先：

※ 製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。

※ 変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 本カタログに記載内容および商品価格は平成 27 年 10 月現在のものです。今後経済状況の変動により変わることがありますのでご了承ください。